


Banque de sang 380 L

Modèle : XC-380L

Marque : MEILING

Origine : CHINE

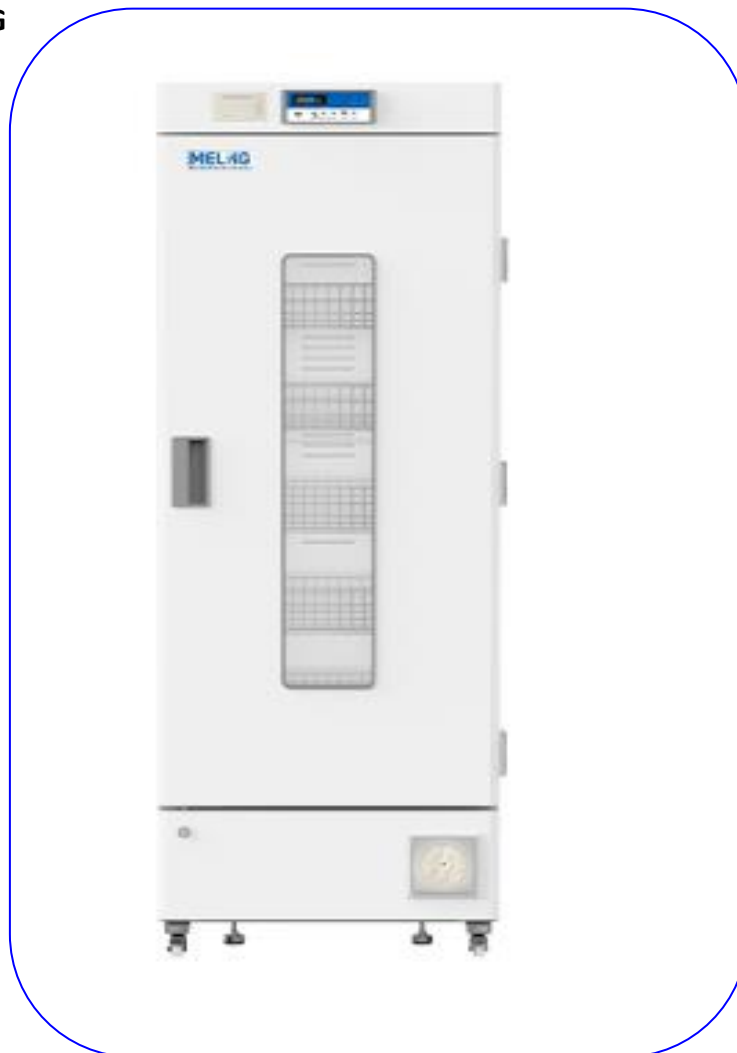

Description :

- Conception d'air de retour pour un contrôle précis de la température
- Réfrigération à haut rendement pour la sécurité du sang
- 5 étagères de revêtement par trempage avec bandes d'étiquettes
- 15 cadres de poches de sang à revêtement par trempage
- Température constante sous contrôle intelligent

Le réfrigérateur de banque de sang Meling 4°C XC-380L est un réfrigérateur de stockage de sang fiable pour protéger la sécurité du sang total, des plasmas sanguins, des compartiments sanguins et des échantillons de sang. Le contrôle intelligent de la température constante assure la précision du contrôle de la température à moins de 2 ~ 6 °C à l'intérieur de l'armoire, ce qui peut parfaitement promettre l'uniformité de la température. Le réfrigérateur de stockage de sang équipé d'une porte en verre à dégivrage automatique assure un stockage sûr du matériel médical ou de laboratoire.

Température constante sous contrôle intelligent

- Conception du conduit d'air de retour, assurant une précision de contrôle de la température de ± 1 °C à l'intérieur de l'armoire ;
- Système de contrôle de température informatisé de haute précision, capteurs intégrés pour la température de la zone supérieure/inférieure, la température ambiante, la température de l'évaporateur et le contrôle du fonctionnement, garantissant un fonctionnement sûr et stable.

Système de sécurité Le système

- d'alarme sonore et visuel parfait est livré avec des fonctions d'alarme pour température élevée, basse température, défaut de capteur, ouverture de porte et panne de courant.
- Réfrigération à haut rendement · Conception avancée de refroidissement par air, contrôle de température de précision, sauvegarde de la sécurité du sang · Récipient intérieur en acier inoxydable, évaporateur à tube de cuivre, réfrigération puissante

Système de réfrigération

- Équipé d'un compresseur à haut rendement de marque, d'un moteur de ventilateur EBM, performant et silencieux.
- Système de contrôle de température informatisé de haute précision, capteurs intégrés pour la température de la zone supérieure/inférieure, la température ambiante, la température de l'évaporateur et le contrôle du fonctionnement, garantissant un fonctionnement sûr et stable

Dégivrage automatique

- Conception du conduit d'air de retour, assurant une précision de contrôle de la température de ± 1 °C à l'intérieur de l'armoire ;
- Équipé d'une fonction de dégivrage automatique, dégivrage forcé.

Conception humanisée

- Équipé de 5 étagères de revêtement par immersion avec bandes d'étiquettes ;
- 15 cadres de poches de sang trempés (cadre en acier inoxydable en option).

Fonctionnalités

- Affichage numérique de la température à haute luminosité permettant à l'affichage de la température d'atteindre 0,1 °C.
- Porte verrouillable avec clé pour empêcher d'ouvrir la porte sans autorisation.
- Tube en cuivre affiné en aluminium et évaporateur de type refroidi par air à haute efficacité.
- Système d'alarme sonore et visible avec alarme haute/basse température, alarme de panne de courant, alarme de porte entrouverte, alarme de panne de courant, etc.
- Porte vitrée à 2 couches avec fonction de dégivrage automatique assurant l'uniformité de la température.
- Isolation en polyuréthane rigide sans CFC pour éviter un échauffement redondant.

Champ d'application

Réfrigérateur de stockage du sang adapté au stockage du sang total, des plaquettes sanguines, des globules rouges, des produits biologiques, des vaccins, des médicaments, des réactifs, etc. ; Convient

Importation de matériel médical

pour une utilisation dans les banques de sang, les hôpitaux, les instituts de recherche, les centres de prévention et de contrôle des maladies, etc.

Caractéristiques techniques :

Réfrigérateur de banque de sang 4°C

Type d'armoire : Droit

Capacité (L) : 380

Taille interne(W*D*H)mm : 604*494*1310

Taille externe(W*D*H)mm : 721*660*1999

NO/GW(Kgs) : 134/154

Performance :

Réglage de la température : 2~6°C

Température ambiante : 16-32°C

Performances de refroidissement : 4°C

Classe climatique : N

Manette : Microprocesseur

Afficher : Affichage numérique

Réfrigération

Compresseur : 1 pc

Méthode de refroidissement : Refroidissement par air

Mode dégivrage : Automatique

Réfrigérant : R290

Construction

Matériel externe : MCP

Matériau intérieur : Acier inoxydable

Tiroirs : 5 (étagère filaire en acier revêtu)

Serrure de porte avec clé : Oui

Port d'accès : 1 pc. Ø 25 mm

Roulettes : 4 (2 roulettes avec frein)

Eurl DARELMED, Locaux C et D Immeuble N°12 Toukacht Commune Tizi Rached W.Tizi Ouzou

TEL.:026 41 98 85 / 0560 57 76 83, fax 026 41 98 56 - e-mail: darelmed@gmail.com

WWW.DARELMED.COM

Importation de matériel médical

Enregistrement de données/Intervalle/Durée d'enregistrement : USB/Enregistrement toutes les 10 minutes / 2 ans

Batterie de réserve : Oui

Alarme

Température : Température élevée/basse, température ambiante élevée

Électrique : Panne de courant, Batterie faible

Système : Erreur de capteur, porte entrouverte, surchauffe du condenseur, défaillance de l'enregistreur de données USB intégré

Accessoire

Système : Contact d'alarme à distance, RS485

Facultatif : Enregistreur graphique